


REM-1000 取扱説明書（修正）

このたびは、松永製作所の製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
製品の改良により、取扱説明書に記載のフットサポートの高さ調整方法が
変更になっております。

この取扱説明書を参考にして頂くようお願い致します。


＜変更前＞ 取扱説明書 11ページ

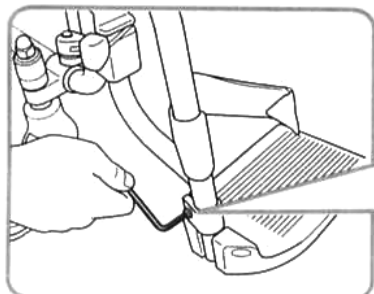

フットサポートを支えながら
ボルトをゆるめる。



ボルト

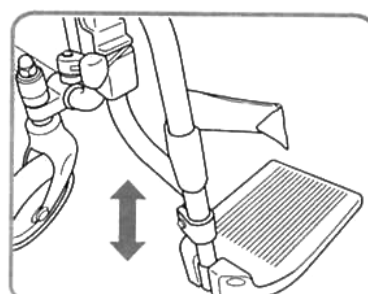

高さを調整し、ボルトを締める。


※適正トルク
10Nm

＜変更後＞

フットサポートの調整

＜高さ（長さ）の調整＞

付属品のスパナで先端ボルトを
少し動くところまで緩める。

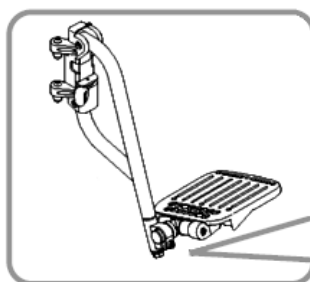


（フットサポート
裏側から見た図）



先端ボルト

高さを調整し、先端ボルトを
締める。

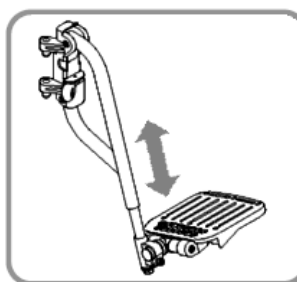


！ 注意

- フットサポートが固定されて
いるか、確認してから使用し
てください。
（フットサポートが脱落し事故
の原因になります。）

していただく

※適正トルク
20Nm

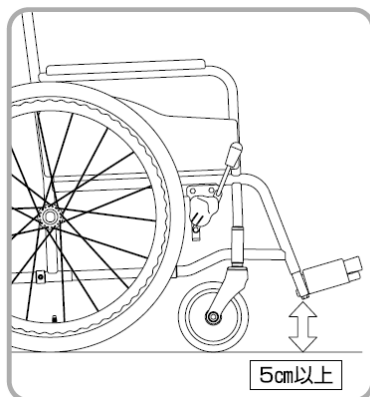

5cm以上

！ 注意

していただく

- フットサポートの高さは地面より5cm以上
でご利用ください。
（路面の凹凸や障害物にフットサポートが
引っかかり急に止まり、転倒事故
の原因になります。）

※ ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。



株式会社 松永製作所

〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484
TEL0584-35-1180(代) FAX0584-35-1270
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>

09.07.